



C.R.D.P. du Limousin

Ingénierie Éducative

Manuel d'utilisation de la maquette

Banc d'étude des ondes sonores

Enseignement de lycée

Articles	Codes
Banc d'étude des ondes sonores	

Document non contractuel

FICHE N°

Objectifs

Le banc d'étude présenté ici permet d'étudier les ondes sonores. On pourra notamment :

- mettre en évidence la ***propagation*** d'une onde sonore (expérience 1),
- mesurer la ***célérité*** du son (vitesse de propagation de l'onde sonore) (expérience 1),
- mettre en évidence à la fois la ***périodicité temporelle*** et la ***périodicité spatiale*** d'une onde sonore (expérience 2),
- mettre en évidence le phénomène de ***réflexion*** d'une onde sonore (expérience 3),
- mettre en évidence le phénomène de ***diffraction*** d'une onde sonore (expérience 4),
- mettre en évidence le phénomène d'***interférences*** acoustiques (expérience 5).

Présentation du dispositif expérimental

- 1 haut-parleur
- 1 tube
- 1 (ou 2) microphone(s)

Matériel supplémentaire (non fourni) nécessaire

- 1 oscilloscope 2 voies et 2 cordons BNC-banane de branchement
- 1 générateur de signaux basses fréquences et un cordon de branchement


Quelques rappels sur les ondes sonores

Lorsqu'un haut-parleur est alimenté par un générateur de signaux basses fréquences, la membrane du haut-parleur se met à vibrer sous l'action des forces de Laplace. Les vibrations de la membrane du haut-parleur entraînent des variations de pression des couches d'air entourant le haut parleur. Ces variations de pression se transmettent de proche en proche, on parle alors de propagation. Il s'agit ici d'une onde dite longitudinale car le déplacement de la membrane du haut-parleur a lieu selon la même direction que la direction de propagation de l'onde. Le microphone est également constitué d'une membrane. Cette membrane se met également à vibrer sous l'action de l'onde de pression (onde sonore). Une tension électrique induite apparaît aux bornes du microphone et c'est cette tension que l'on observera à l'aide de l'oscilloscope.

On rappelle que la longueur d'onde λ est la distance parcourue par l'onde avec une célérité c en une période T telle que :

$$\lambda = cT \text{ où la période (temporelle) } T \text{ est donnée par } T = \frac{1}{f} .$$

Expérience 1 : célérité du son dans l'air

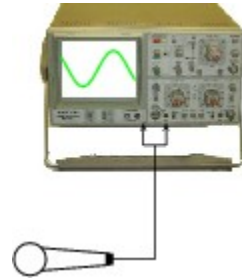

Alimenter le haut-parleur avec une tension sinusoïdale délivrée par le générateur de signaux basses fréquences. On choisira une fréquence à la fois compatible à la bande passante du haut-parleur et à celle du microphone. On prendra par exemple $f = 5 \text{ kHz}$

Observer cette tension sur la voie 1 de l'oscilloscope.

Placer le microphone à l'intérieur du tube (à une dizaine de centimètres du haut-parleur).

Observer la tension délivrée par le microphone sur la voie 2 de l'oscilloscope. Dans la position choisie pour le microphone, le signal observé doit avoir une amplitude maximale.

Ajuster la position du microphone afin que les deux courbes observées à l'oscilloscope soient en phase. Noter cette position d_0 entre le haut-parleur et le microphone.

Éloigner le microphone jusqu'à obtenir à nouveau les deux tensions en phase. Noter la position d_1 . Entre d_0 et d_1 l'onde sonore a parcouru la longueur d'onde λ pendant une période temporelle T .

Éloigner à nouveau le microphone jusqu'à obtenir les deux tensions en phase. Noter la position d_2 . Entre d_0 et d_2 l'onde sonore a parcouru deux longueurs d'onde c'est à dire 2λ pendant deux périodes temporelles c'est à dire $2T$.

Procéder ainsi pour différentes positions où les deux signaux sont en phase.

Reporter les résultats dans un tableau de mesure où figurent les grandeurs d_k , $x_k = d_k - d_0$, $\tau = k T$.

Tracer x_k en fonction de τ . On obtient une droite passant par l'origine. Le coefficient directeur de cette droite est la célérité de l'onde sonore dans l'air.

Remarque : on doit normalement trouver $c = 345 \text{ m.s}^{-1}$ dans de l'air à température proche de 20°C

Expérience 2 : périodicité temporelle et périodicité spatiale

Périodicité temporelle T

Brancher le haut-parleur sur le générateur de signaux basses fréquences.

Régler le GBF afin qu'il délivre une tension sinusoïdale de fréquence $f = 5\text{kHz}$

Brancher le microphone sur la voie 1 de l'oscilloscope.

Placer le microphone dans une position quelconque en le pointant vers le haut-parleur.

Mesurer à l'aide de l'oscilloscope la période (temporelle) de la tension délivrée par le microphone.

Déplacer le microphone.

Mesurer à nouveau la période de la tension délivrée par le microphone.

On observe que la tension délivrée par le microphone est toujours périodique dans le temps. Sa période temporelle T ne dépend pas du lieu où le microphone est placé.

Périodicité spatiale λ

Brancher le haut-parleur sur le générateur de signaux basses fréquences.

Régler le GBF afin qu'il délivre une tension sinusoïdale de fréquence $f = 5\text{kHz}$

Brancher deux microphones sur les voies 1 et 2 de l'oscilloscope.

Lorsque les 2 microphones sont placés côte à côte les tensions observées sont de même amplitude et en phase car les vibrations sonores arrivant sur les microphones le sont également.

Écarter un des deux microphones (microphone 2). L'autre microphone (microphone 1) est appelé microphone de référence. La tension délivrée par le microphone 2 se décale par rapport à celle délivrée par le microphone de référence. Cette tension est en retard par rapport à la tension du microphone de référence à cause de la propagation de l'onde sonore. Si l'on continue d'éloigner légèrement le microphone 2, les signaux sont à nouveau en phase. La distance minimale qui sépare les deux microphones et pour laquelle les deux signaux sont en phase est appelée la

longueur d'onde λ . Il s'agit ici d'une périodicité spatiale.

Si l'on éloigne le microphone 2 à nouveau de cette distance, on va à nouveau observer les deux signaux en phase. D'une manière plus générale, il suffit donc d'éloigner les microphones d'une distance $x = k \lambda$ pour être dans ces conditions (avec k un nombre entier).

Expérience 3 : réflexion d'une onde sonore

Matériel supplémentaire (non fourni) nécessaire

- 1 écran réfléchissant (plaque métallique ou en verre)
- 1 écran isolant (bois ou autre)
- feuille de papier A3

Placer une feuille de papier A3 sur la table ainsi que l'écran réfléchissant. Noter sur la feuille la position de cet écran.

Brancher le haut-parleur sur le générateur de signaux basses fréquences.

Régler le GBF afin qu'il délivre une tension sinusoïdale de fréquence $f=5\text{kHz}$. Observer cette tension sur la voie 1 de l'oscilloscope

Diriger le haut parleur afin que son axe fasse une direction $\alpha=45^\circ$ par rapport à la normale à l'écran réfléchissant.

Repérer sur le papier A3 la position du haut-parleur et la direction de l'onde incidente.

Placer un écran isolant¹ selon la normale à l'écran réfléchissant. Laisser un léger espace entre l'écran isolant et l'écran réfléchissant.

Repérer sur le papier A3 la position de la normale à l'écran réfléchissant.

Brancher le microphone sur la voie 2 de l'oscilloscope et placer ce microphone de l'autre côté de l'écran séparateur.

Déplacer le microphone afin de trouver la position où l'amplitude de l'onde est maximale.

¹ L'écran isolant permet d'éviter de capter les ondes arrivant directement sur le microphone sans réflexion sur l'écran réfléchissant.

On doit normalement observer que l'amplitude de l'onde réfléchie est maximale lorsque l'angle r du rayon réfléchi par rapport à la normale est égal à l'angle i du rayon incident par rapport à la normale.

On remarque de plus que les ondes incidentes et réfléchies ont même période (temporelle et donc spatiale car elles se propagent dans le même milieu).

Expérience 4 : diffraction d'une onde sonore

Matériel supplémentaire (non fourni) nécessaire

- Chambre sourde² équipée d'un diaphragme
- Feuille de papier A3

Placer le haut-parleur dans la chambre sourde.

Brancher le haut-parleur sur le générateur de signaux basses fréquences.

Régler le GBF afin qu'il délivre une tension sinusoïdale de fréquence $f = 2\text{kHz}$. Observer cette tension sur la voie 1 de l'oscilloscope. Elle doit être parfaitement sinusoïdale.

Régler le diamètre du diaphragme de la chambre sourde afin qu'il soit de la taille de la longueur d'onde de l'onde sonore.

Par exemple pour $f = 2\text{kHz}$ il faut $D = \lambda = \frac{c}{f} = 0,17\text{ m}$

Brancher le microphone sur la voie 2 de l'oscilloscope.

Placer le microphone à l'extérieur de la chambre sourde.

On observe à l'oscilloscope une tension de même fréquence que le signal délivré par le GBF. Toutefois on remarque que le signal observé n'est plus sinusoïdal.

A l'intérieur de la chambre sourde, l'onde incidente est une onde plane progressive harmonique. L'onde diffractée par un trou de faible dimension est une onde circulaire.

² La chambre sourde est une boîte dont l'intérieur est réalisé dans un matériau absorbant les ondes sonores. On effectue un trou dans cette chambre et on place un diaphragme afin de pouvoir modifier le rayon de ce trou. Il doit être de la taille de la longueur d'onde afin qu'il se comporte comme une source ponctuelle.

Expérience 5 : interférences acoustiques

Matériel supplémentaire (non fourni) nécessaire

- 1 haut-parleur supplémentaire (identique à l'autre)

Brancher en dérivation les deux haut-parleurs sur le générateur de signaux basses fréquences afin qu'ils génèrent deux ondes de même fréquence et de même amplitude. On réglera le GBF à la fréquence $f = 1000 \text{ Hz}$.

Placer ces deux haut-parleurs face à face et séparés de plusieurs dizaines de centimètres.

Brancher 2 microphones sur les voies 1 et 2 de l'oscilloscope.

Déplacer un des microphones entre les deux haut-parleurs.

On remarque que l'amplitude du signal varie entre un minimum et un maximum. On parle généralement de points nodaux (noeud) et de point de vibration maximale (ventre).

La distance qui sépare deux noeuds consécutifs est égale à $d = \frac{\lambda}{2}$.

On peut donc mesurer, à l'aide des interférences acoustiques, la célérité du son car $c = \frac{\lambda}{T} = \lambda f = 2 d f$.